

ERKODENT GENERAL CATALOG

エルコデント総合カタログ 2023~



世界の歯科医療発展のために

ドイツに本社を置くエルコデント社は、加圧・吸引成型器、成型用シートなどオーラルプライアンス関連製品を中心とした歯科器材メーカーです。特に主力製品の加圧成型器【エルコプレス】は、日本をはじめ世界各国で使用され信頼のブランドとして高い評価を得ています。

エルコデント社は、世界の歯科医療のさらなる発展のため日々研究・開発を重ね、高品質な製品を生み出し続けていきます。


オーラルプライアンスの製作からメンテナンスまでトータルにサポート

成型器 ▶ P.3-4

成型シート ▶ P.5-8



加圧成型器

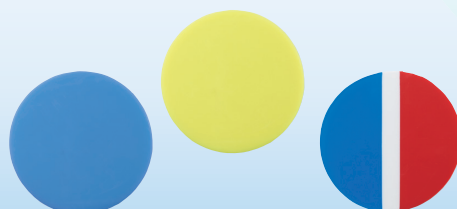


ソフトシート


模型の準備

成型器の選択


シートの選択

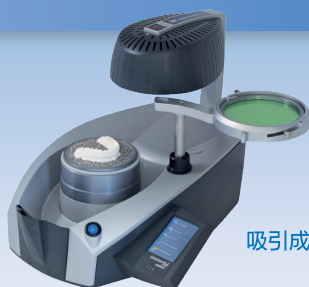

吸引成型器

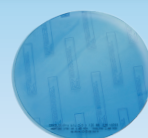

2層・3層構造シート

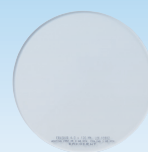

ハードシート

エルコデント社は1963年、
 歯科医師Erich H.Kopp氏により創業され
 60年以上高品質な製品を提供し続けています。



サイレンサー SL ▶ P.9


オプション製品 ▶ P.10-14



スリープスプリント
 製作用パーツ



研磨器材

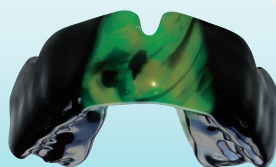


成型

形態修正・
 研磨

オーラル
 アプライアンス
 の完成

メンテナンス

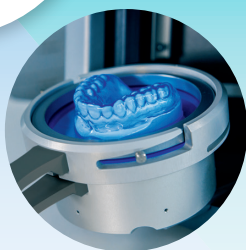

切削器材



洗浄剤

エルコデント成型器の特徴

加圧型・吸引型ともに、精緻な適合性にご満足いただけることを確信いたします。ご使用目的が矯正アライナーや拡大床、コーピングの製作であれば加圧型を、対合歯の圧痕を成型過程で付与されたい場合は、吸引型と対合歯圧跡付与器オクルフォーム3の併用を推奨いたします。

また、サーモフォーミング技術を多様な症例に使用されるのであれば、加圧型・吸引型両方の所有をお勧めしております。



▲製品の詳細情報



▲製品紹介動画

加圧型

高圧成型により、高精度の口腔内装置製作を実現します。

また、真上から加圧するタイプのため、水平方向から被覆するタイプと比較し空気の流入を防止し、シート厚をより均一に仕上げることが可能です。

吸引型

真空ポンプによる独自の瞬間吸引方式を採用しており、クーリング中も持続吸引します。

ご使用の際に、類似製品との比較における優位性を実感できます。



エルコプレス 加圧成型器 Pressure

- 自動圧接による容易な操作性
- 最大加圧6.0気圧(0.6MPa)により、精度の高いオーラルプライアンスの成型を実現
- 液晶タッチパネル操作によるシンプルな操作性(日本語対応・動画表示・スケジュールインストール済)
- 予備加熱不要、赤外線温度センサー機能による徹底した温度管理
- 高性能赤外線ヒーターによる均一なシート軟化

エルコプレス ci motion



届出番号:14B1X00011000590

エアークンプレッサー
内蔵タイプ

オートタイプ



- ・電源電圧: AC100V 50/60Hz
- ・消費電力: 440W
- ・センサー許容感知温度: 240℃以下
- ・最大使用圧力: 0.6MPa (6bar)
- ・ノイズレベル: <70db (A)
- ・サイズ: W350×D430×H320mm
- ・重量: 21.3kg

製品番号	標準価格
J82671	728,000円

エルコプレス motion



届出番号:14B1X00011000589

エアークンプレッサー
外部接続タイプ*

オートタイプ

*外部からのエア供給が必要です。



- ・電源電圧: AC100V 50/60Hz
- ・消費電力: 380W
- ・センサー許容感知温度: 240℃以下
- ・最大使用圧力: 0.6MPa (6bar)
- ・ノイズレベル: <70db (A)
- ・サイズ: W350×D430×H320mm
- ・重量: 18.9kg

製品番号	標準価格
J82670	650,000円

精密成型を実現するエルコデント社の高性能熱可塑性樹脂成型器。製作用途に応じて、加圧成型器(プレッシャータイプ)2種類、吸引成型器(バキュームタイプ)2種類の全4機種からお選びいただけます。



エルコフォーム 吸引成型器 Vacuum

- 最大真空値 0.8bar による適合精度の高いオーラルプライアンスの成型を実現
- 予備加熱不要、赤外線温度センサー機能による自動温度管理
- 液晶タッチパネル操作によるシンプルな操作性(日本語対応・動画表示・スケジュールインストール済)
- 高性能赤外線ヒーターによる均一なシート軟化

エルコフォーム 3D motion



届出番号:14B1X00011000575

オートタイプ

オートマチックサーモフォーミング(自動)により
容易な操作性を実現



- ・電源電圧:AC100V 50/60Hz
- ・消費電力:340W
- ・センサー許容感知温度:240℃以下
- ・内蔵型真空ポンプ:真空値0.8bar
- ・最大吸引力:6L/分
- ・ノイズレベル:<60db (A)
- ・サイズ:W350×D370×H315mm
- ・重量:13.9kg

製品番号	標準価格
J80632	605,000円

エルコフォーム 3D Plus



届出番号:14B1X00011000509

マニュアルタイプ

マニュアルサーモフォーミング(手動)



- ・電源電圧:AC100V 50/60Hz
- ・消費電力:340W
- ・センサー許容感知温度:240℃以下
- ・内蔵型真空ポンプ:真空値0.8bar
- ・最大吸引力:6L/分
- ・ノイズレベル:<60db (A)
- ・サイズ:W350×D370×H315mm
- ・重量:11.9kg

製品番号	標準価格
J81877	493,000円

エルコフォーム3D専用オプション



オクルフォーム3 アライメンター付




対合歯圧痕付与に使用

製品番号	標準価格
J81924	174,000円

オクルフォーム3用 アライメンター (単品)

モデルポット上の模型の
切歯点と咬合平面の平均値
アライメントをとるデバイス

製品番号	標準価格
J81923	6,900円

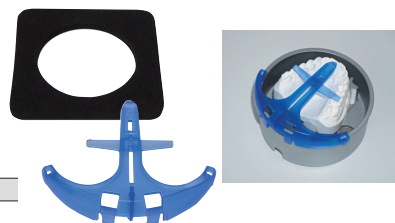

オクルフォーム3用 OCC3-4P

3Dプリントモデルを
固定するためのデバイス
スキャナー・3Dプリンター・
模型作成ソフト要

製品番号	標準価格
J80943	20,800円



スポーツマウスガード用シート



届出番号:14B1X00011000500 届出番号:14B1X00011000501

用途 スポーツマウスガード

カラーマウスガード

材質:EVA

シングルカラー 全14色

シングルカラー(単色)のスポーツマウスガード用成型シート



カラーマウスガード シングルカラー各種にはそれぞれイソホイール(分層)シートが貼付されています。但し現在移行中のため、貼付されていない製品も混在しております。

カラーマウスガードフリースタイル

材質:EVA

マーブルカラー 全10色

マーブルカラー(特殊色)のスポーツマウスガード用成型シート




カラーマウスガードマルチカラー

材質:EVA

フラッグカラー 全5色

フラッグカラー(国旗色)のスポーツマウスガード用成型シート

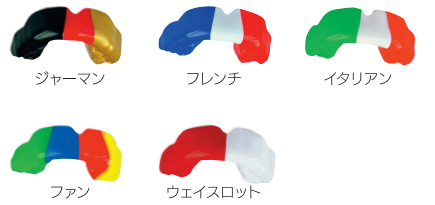


※複数色の成型シートを圧接する際は圧接位置や条件により仕上がりが変わります。圧接前に十分なご確認をお願いいたします。画像のような仕上がりにならない場合もございます。

種類	カラー	丸型 (φ120mm)						角型 (125×125mm)										
		1枚		5枚 ※		5枚 ※		5枚 ※		5枚 ※								
		厚さ:2.0mm		厚さ:4.0mm		厚さ:2.0mm		厚さ:4.0mm		厚さ:2.0mm		厚さ:4.0mm						
	製品番号	標準価格	製品番号	標準価格	製品番号	標準価格	製品番号	標準価格	製品番号	標準価格	製品番号	標準価格						
カラーマウスガード(シングルカラー)	ブライトレッド	J82625	1,150円	J82639	2,100円	J81625	4,400円	J81639	8,200円	J81654	4,400円	J81659	8,200円					
	ブライトイエロー	J82626		J82640		J81626		J81640		J81653		J81657						
	ブライトブルー	J82627		J82641		J81627		J81641		J81655		J81660						
	ブライトグリーン	J82628		J82642		J81628		J81642		J81656		J81658						
	ブライトピンク	J82629		J82643		J81629		J81643		J81715		J81664						
	ピュアホワイト	J82635		J82649		J81635		J81649		J81722		J81662						
	ダークブルー	J82631		J82645		J81631		J81645		J81717		J81665						
	ライトブルー	J82632		J82646		J81632		J81646		J81718		J81726						
	マルーン	J82633		J82647		J81633		J81647		J81720		J81728						
	ディープグリーン	J82634		J82648		J81634		J81648		J81721		J81729						
	ディープレッド	J82630		J82644		J81630		J81644		J81716		J81663						
	ディープブラック	J82636		J82650		J81636		J81650		J81723		J81661						
	ゴールド	J82637		J82651		J81637		J81651		J81724		J81730						
	シルバー	J82638		J82652		J81638		J81652		J81725		J81731						
	アソート(15枚) 上記各色1枚・クリア1枚	—	—	—	J80674	12,900円	J80684	24,600円	J81719	12,900円	J81727	24,600円						
カラーマウスガード(フリースタイル)	カモフラージュ	J82604	3,400円	J82615	4,100円	J81604	13,700円	J81615	16,400円	J81732	13,700円	J81744	16,400円					
	ラバ	J82605		J82616		J81605		J81616		J81733		J81745						
	タイダイ	J82606		J82617		J81606		J81617		J81734		J81746						
	レインボー	J82607		J82618		J81607		J81618		J81735		J81747						
	コンフェッティ	J82608		J82619		J81608		J81619		J81736		J81748						
	アソート① 上記各色1枚	—		—		—		J81609		13,700円		J80694		16,400円	J81741	13,700円	J81753	16,400円
	ゼブラ	J82610		J82620		J81610		J81620		J81737		J81749						
	ゴールドフレイク	J82611		J82621		J81611		J81621		J81738		J81750						
	シルバーフレイク	J82612		J82622		J81612		J81622		J81739		J81751						
	カモフラージュストリップ	J82613		J82623		J81613		J81623		J81740		J81752						
ラバストリップ	J82614	J82624	J81614	J81624	J81742	J81754												
アソート② 上記各色1枚	—	—	—	J80693	13,700円	J80695	16,400円	J81743	13,700円	J81755	16,400円							
カラーマウスガード(フラッグカラー)	ウェイスロット	J80680	3,500円	J80691	4,100円													
	フレンチ	J80675	5,300円	J80686	5,500円													
	イタリアン	J80677		J80688														
	ジャーマン	J80676	J80687															
	ファン	J80678	6,900円	J80689	8,200円													

※シングルカラーアソートのみ15枚

プレイセーフ トリプル (3層構造シート)

届出番号: 14B1X00011000570

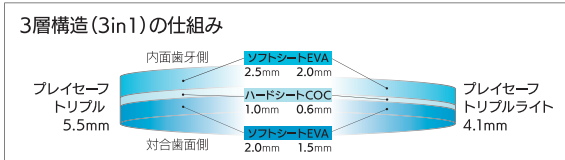

※他カラーは、P5掲載の「スポーツマウスガード用シート」製品画像をご参照ください。

用途: スポーツマウスガード ・材質: EVA / COC

高い衝撃吸収効果と衝撃分散効果を兼ね備え、ソフトシート&ハードシートを一体化したトリプルレイヤー(3層構造)スポーツマウスガード用シート

カラー	プレイセーフ トリプル (丸型φ120×厚さ5.5mm)				プレイセーフ トリプルライト (丸型φ120×厚さ4.1mm)			
	1セット (シート1枚+エルコボックス1個)		シート単品 (5枚)		1セット (シート1枚+エルコボックス1個)		シート単品 (5枚)	
	製品番号	標準価格	製品番号	標準価格	製品番号	標準価格	製品番号	標準価格
クリア	J81685	5,400円	J81872	20,700円	J81873	4,900円	J81874*	19,000円
ブライトレッド	J81756*		J81800*		J81776*		J81824*	
ブライトイエロー	J81757		J81801*		J81777*		J81825*	
ブライトブルー	J81681		J81802		J81778		J81826	
ブライトグリーン	J81682*		J81803*		J81779*		J81827*	
ブライトピンク	J81683*		J81804*		J81780*		J81828*	
ディープレッド	J81758*		J81805*		J81781		J81829*	
ダークブルー	J81759*		J81806*		J81782		J81830*	
ライトブルー	J81760*		J81807*		J81783		J81831*	
マルーン	J81761*		J81808*		J81784*		J81832*	
ディープグリーン	J81762*		J81809*		J81785*		J81833*	
ピュアホワイト	J81763		J81810*		J81786		J81834	
ディープブラック	J81684*		J81811*		J81787*		J81835*	
ゴールド	J81764		J81812		J81788		J81836*	
シルバー	J81765*		J81813*		J81789*		J81837*	
カモフラージュ	J81766*		J81814*		J81790		J81838*	
ラバ	J81767*		J81815*		J81791*		J81839*	
タイダイ	J81768*	J81816*	J81792	J81840*				
レインボー	J81769*	J81817*	J81793*	J81841*				
コンフェッティ	J81770*	J81818*	J81794*	J81842*				
ゼブラ	J81771*	J81819*	J81795*	J81843*				
ゴールドフレック	J81772	J81820*	J81796*	J81844*				
シルバーフレック	J81773*	J81821*	J81797*	J81845*				
カモフラージュストリップ	J81774*	J81822*	J81798*	J81846*				
ラバストリップ	J81775*	J81823*	J81799	J81847*				

※の製品は受注後のお取り寄せとなります。

スターターセット

セット内容

- ・シート (クリア) ×1
- ・エルコボックス ×1
- ・プレイセーフ バイトスペーサー ×1
- ・プレイセーフ フェイスチャック ×1

プレイセーフトリプル (丸型φ120×厚さ5.5mm) セット

製品番号	単位	標準価格
J81678	1セット	8,900円

プレイセーフトリプルライト (丸型φ120×厚さ4.1mm) セット

製品番号	単位	標準価格
J81848	1セット	7,400円

単品



※オクルフォーム3を用いた対合圧痕に使用する専用パーツ

プレイセーフ フェイスチャック

製品番号	単位	標準価格
J81680	1個	2,900円

プレイセーフ バイトスペーサー

製品番号	単位	標準価格
J81868	3枚	2,100円

エルコボックス スケルトンタイプ

製品番号	単位	標準価格
J80051	20個	12,100円

エルコフレックス (ソフトシート)




エルコフレックス

認証番号: 15700BZY00845000

用途: スポーツマウスガード
ドラッグデリバリートレー
ポジショナー
ブラケットトランスファートレー

・材質: EVA
・ショア硬度: 82
・カラー: クリア

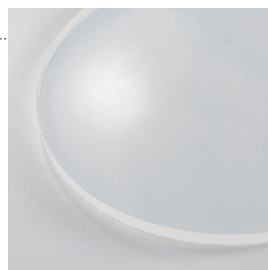

入数	厚さ	丸型 (φ120mm)		角型 (125×125mm)	
		製品番号	標準価格	製品番号	標準価格
20枚	1.0mm	J80461	10,300円	J80111	10,300円
	1.5mm	J80462	5,300円	J80112	5,300円
10枚	2.0mm	J80463	8,500円	J80113	8,500円
	3.0mm	J80464	10,900円	J80118	10,900円
	4.0mm	J80465	16,400円	J80123	16,400円
	5.0mm	J80466	19,200円	—	—

エルコフレックス95

届出番号: 14B1X00011000506

用途: ドラッグデリバリートレー
オクルーザルプリント

・材質: EVA
・ショア硬度: 95
・カラー: クリア



入数	厚さ	丸型 (φ120mm)		角型 (125×125mm)	
		製品番号	標準価格	製品番号	標準価格
20枚	1.0mm ※	J80564	10,300円	J81878	10,300円
	1.5mm	J80561	5,300円	J81879	5,300円
10枚	2.5mm	J80562	9,400円	J81880	9,400円
	4.0mm	J80563	16,400円	J81881	16,400円

※厚さ 1.0mm: ホワイトニング・フッ化物塗布トレー用


エルコフレックス各種にはそれぞれイソソイル(分離)シートが貼付されています。

エルコジュール (ハードシート)



エルコジュール・エルコジュール フリーズ

認証番号: 219AKBZX00128000

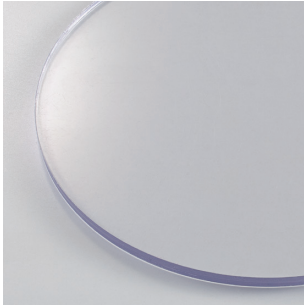

エルコジュール



エルコジュール フリーズ

用途) オクルーザルスプリント・スリープスプリント・ドリリングテンプレート
X-rayテンプレート・ドラッグデリバリートレー・リテーナー

- ・材質: PETG
- ・カラー:
エルコジュール/クリア
エルコジュール フリーズ/ターコイズ

アクリルレジンとの接合が可能

種類	入数	厚さ	丸型 (φ120mm)		角型 (125×125mm)	
			製品番号	標準価格	製品番号	標準価格
エルコジュール	20枚	0.5mm	J80421	4,900円	—	—
		0.6mm	J80422	6,300円	J80102	6,300円
		0.8mm	J80423	8,200円	J80103	8,200円
		1.0mm	J80424	9,900円	J80104	9,900円
エルコジュール	10枚	1.5mm	J80425	6,300円	J80105	6,300円
		2.0mm	J80426	8,200円	J80106	8,200円
		3.0mm	J80427	13,700円	—	—
		4.0mm	J80428	16,400円	—	—
エルコジュール フリーズ	20枚	1.0mm	J80554	9,900円	—	—
		1.5mm	J80555	6,300円	—	—
		2.0mm	J80556	8,200円	—	—
エルコジュール フリーズ	10枚	2.0mm	J80556	8,200円	—	—
		3.0mm	J80557	13,700円	—	—

エルコジュールS

用途) スポーツマウスガード用補強材

- ・材質: SBS
- ・カラー: クリア

レイヤードタイプ マウスガードの補強材用

入数	厚さ	丸型 (φ120mm)	
		製品番号	標準価格
20枚	0.8mm	J80435	8,200円




エルコジュール A1

届出番号: 14B1X00011000502

用途) コスメティックスプリント

- ・材質: PETG
- ・カラー: A1色

入数	厚さ	丸型 (φ120mm)		角型 (125×125mm)	
		製品番号	標準価格	製品番号	標準価格
20枚	0.6mm	J80576	13,700円	J80581	13,700円
	1.0mm	J80577	18,000円	J80579	18,000円
10枚	2.0mm	J80578	18,000円	J80580	18,000円

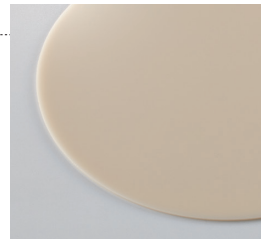

エルコジュール A3

届出番号: 14B1X00011000569

用途) コスメティックスプリント

- ・材質: PETG
- ・カラー: A3色

入数	厚さ	丸型 (φ120mm)	
		製品番号	標準価格
20枚	0.6mm	J81670	13,700円
	1.0mm	J81671	18,000円
10枚	2.0mm	J81672	18,000円




エルコジュール各種にはそれぞれイソホイール(分離)シートが貼付されています。

エルコロックプロ (2層構造シート)



届出番号: 14B1X00011000497

用途) オクルーザルスプリント
スリープスプリント
プロテクションスプリント
リテーナー

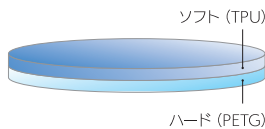

- ・材質: PETG / TPU



クリア

ブルー

グリーン

ピンク

ハード (PETG) & ソフト (TPU) の2層構造シート

カラー	入数	厚さ	丸型 (φ120mm)		角型 (125×125mm)	
			製品番号	標準価格	製品番号	標準価格
クリア	20枚	1.0mm	J81673	20,700円	J81882	20,700円
		1.3mm	J81674	21,900円	J81883	21,900円
		2.0mm	J80592	13,700円	J81884	13,700円
	10枚	3.0mm	J80593	16,400円	J81885	16,400円
		4.0mm	J80594	19,200円	—	—
		5.0mm	J80595	21,900円	—	—
ブルー	10枚	2.0mm	J81692	13,700円	J81886	13,700円
		3.0mm	J81693	16,400円	J81887	16,400円
		4.0mm	J81694	19,200円	—	—
		5.0mm	J81695	21,900円	—	—

カラー	入数	厚さ	丸型 (φ120mm)		角型 (125×125mm)	
			製品番号	標準価格	製品番号	標準価格
グリーン	10枚	2.0mm	J81861	13,700円	J81890	13,700円
		3.0mm	J81862	16,400円	J81891	16,400円
		4.0mm	J81863	19,200円	—	—
		5.0mm	J81864	21,900円	—	—
		2.0mm	J81857	13,700円	J81888	13,700円
ピンク	10枚	3.0mm	J81858	16,400円	J81889	16,400円
		4.0mm	J81859	19,200円	—	—
		5.0mm	J81860	21,900円	—	—

※ソフト (TPU) 層の厚み 1.0mm、1.3mm → 0.4mm 2.0mm 以上 → 1mm

エルコロックプロにはイソホイール(分離)シートが貼付されています。

エルコジュール社の成型シートは、徹底した品質管理のもと製造されています。スポーツマウスガード・ナイトガード・スプリント・スリープスプリントなど、さまざまな用途で選択できる成型シートをラインナップしています。

エルコレン

認証番号: 15700BZY00846000



用途 コーピング・フック物ゲル用スペーサー
テンポラリークラウン

・材質: PE


アクリルレジンと接着しない特徴を持ったセパレートシート

製品番号	タイプ	厚さ	カラー	入数	標準価格
J80401	丸型 (φ120mm)	0.5mm	乳白色	20枚	3,100円
J80402		0.6mm			3,800円
J80403		0.7mm			4,400円
J80405		1.0mm			6,100円

エルコレン各種にはそれぞれイソホイール(分離シート)が貼付されています。

エルコクリル

認証番号: 15700BZY00833000

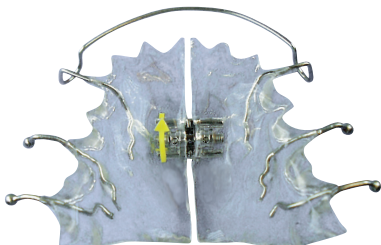

用途 拡大床・リテーナー

・材質: PMMA

拡大床製作用PMMAシート

製品番号	タイプ	厚さ	カラー	入数	標準価格
J80455	丸型 (φ120mm)	1.5mm	クリア	10枚	9,400円
J80456		2.0mm			10,300円
J80457		2.5mm			10,900円

エルコプラスト PLA

届出番号: 14B1X00011000581



用途 上下顎用個人トレー・基礎床


・材質: PLA

個人トレー、基礎床製作用シート

製品番号	タイプ	厚さ	カラー	入数	標準価格
J81853	丸型 (φ120mm)	3.0mm	ホワイト	10枚	6,400円
J81854		4.0mm			7,700円
J81855		3.0mm	クリア		6,400円
J81856		4.0mm			7,700円
J81852		1.5mm	ローズ		3,200円

PLAトレーハンドル

届出番号: 14B1X00011000582

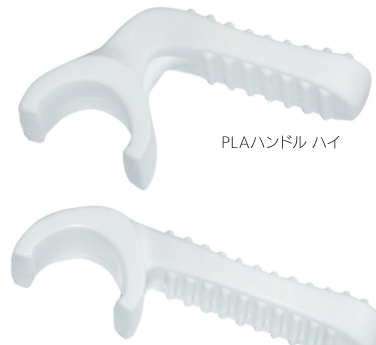

用途 個人トレーシート用ハンドル

・材質: PLA

エルコプラストPLA専用

製品番号	種類	入数	標準価格
J81850	PLAハンドル ハイ	50個	8,800円
J81851	PLAハンドル フラット		

エルコポーロ



用途 個人トレー製作時に使用するスペーサー

模型上に据付後、成型することで
印象材を盛るスペースを確保し、内側の粗面仕上げが可能

製品番号	タイプ	厚さ	入数	標準価格
J80382	丸型(φ95mm) エルコプレス用	8.0mm	16枚	6,900円
J80383	丸型(φ95mm) エルコフォーム用	3.0mm	40枚	

スリープスプリント製作用パーツ


サイレンサーSLを用いたスリープスプリントの特徴

上下顎スプリント エルコロックプロ3.0mm（ハード&ソフトの2層構造シート）を使用し、装着性（快適性）を向上

はめ込み式パーツ




容易なアンカーとコネクタの脱着を実現

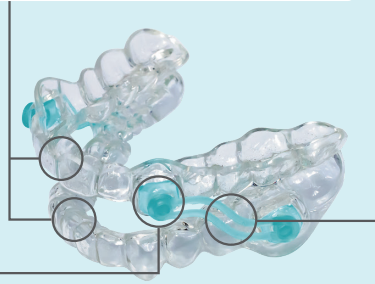

ダブルS状スロットコネクタ

- ①睡眠時の下顎後方移動を防止
- ②各パーツに加わる過度な負担を軽減し、装置の耐久性を向上
- ③可動領域（前方・側方）の自由度を広げ、装置の性能を向上

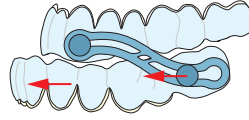

① 機能性

アンカーがコネクタ内を自由にスライドするため、閉閉時の水平運動が可能

② シンプルな操作性

上下顎の位置関係の記録から装置の製作パーツまで取り揃えたオールインワンシステム

③ 快適性と耐久性

コネクタに加わる過度な負担を回避し装置の耐久性を向上

サイレンサーSL

届出番号:14B1X00011000572




用途 スリープスプリント

材質:PLA

ダブルS状スロットコネクタを採用したスプリント製作用パーツ


製品番号	種類	入数	標準価格
J81688	サイレンサーSLパーツカード	1セット	4,200円
J81689		10シート	36,900円
J81690	サイレンサーSLゲージ	5枚	5,800円
J81696	サイレンサーSLコネクタ	1枚	1,800円
J81121	サイレンサーSLコネクタ 21mm	10組	2,300円
J81122	サイレンサーSLコネクタ 22mm		
J81123	サイレンサーSLコネクタ 23mm		
J81124	サイレンサーSLコネクタ 24mm		
J81125	サイレンサーSLコネクタ 25mm		
J81126	サイレンサーSLコネクタ 26mm		

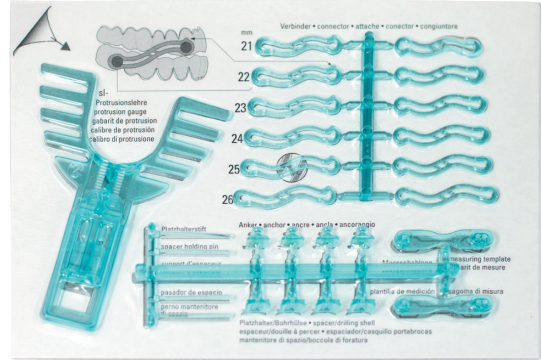

サイレンサーSLパーツカード



サイレンサーSLゲージ

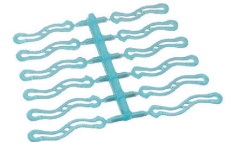

サイレンサーSLコネクタ

上記関連商品

エルコロックプロ ブルー 3.0mm

製品番号	入数	標準価格
J81693	10枚	16,400円

届出番号:14B1X00011000497

エルコロックプロ 3.0mm

製品番号	入数	標準価格
J80593	10枚	16,400円

届出番号:14B1X00011000497

エルコジュール 2.0mm

製品番号	入数	標準価格
J80426	10枚	8,200円

認証番号:219AKBZX00128000

ブロックアウトワックスライラック

製品番号	容量	標準価格
J80386	50g	6,500円

届出番号:14B1X00011000514

エルコガムライラック

製品番号	容量	標準価格
J81892	150g	5,800円

リスコB

製品番号	入数	標準価格
J81849	10枚	8,700円

届出番号:14B1X00011000583

エルコカッターII

製品番号	単位	標準価格
J80645	2本	9,800円

届出番号:14B1X00011000584

MGフォーミングバーZr

製品番号	種類	単位	標準価格
L20026	ORD701 Xファイブ ホワイト	1本	5,000円
L20028	ORD1501 ミディアム ブラック		

届出番号:13B1X10089001004

キット内容

- 研磨材×1
- パフ×1

スプリントフィニッシャー

製品番号	種類	入数	標準価格
L20030	キット	1セット	5,000円
L20031	パフ	6枚	3,800円

届出番号:27B3X00139000082, 27B3X00139000083

HSSドリル1.4mm

製品番号	単位	標準価格
J81697	1本	3,500円

届出番号:14B1X00011000576

リスコsil



届出番号:14B1X00011000591

切削性に優れた海绵状ホイール
中研磨から仕上げ研磨までのワンステップ研磨も可能

製品番号	種類	径	厚さ	単位	標準価格
J80060	S	16mm	2.0mm	6枚	10,400円
J80061	M	27mm	2.0mm		11,500円
J80062	L	27mm	4.0mm		12,700円
J80063	セット	—	—	3枚 (S,M,L各1枚)	6,900円



用途 ソフトシート、ハードシートの中研磨～仕上げ研磨 ・マンドレル付

リスコ



届出番号:14B1X00011000511



用途 ソフトシート、ハードシートの中研磨 ・マンドレル付

ハーフオープンスタビライズド構造の硬質ホイール
ソフトシート、ハードシートの中研磨に使用

製品番号	単位	標準価格
J80043	10枚	8,500円

リスコID



届出番号:14B1X00011000499



用途 ソフトシート、ハードシートの細部研磨 ・マンドレル付

熱圧縮形成されたディスクタイプの硬質ホイール
ダイヤモンドディスク等でのシェーピング形成が可能な為、
シートの細部(歯頸部や鼓形空隙)の研磨に使用

製品番号	単位	標準価格
J80053	6枚	8,500円

リスコB



届出番号:14B1X00011000583



用途 ハードシートの中研磨 ・マンドレル付

ハードシート中研磨用超硬質ホイール
エルコジュールやエルコロックプロの中研磨に使用
超硬質構造の為、高い耐久性を実現

製品番号	単位	標準価格
J81849	10枚	8,700円

リスコ



届出番号:14B1X00011000510

用途 ソフトシートの仕上げ研磨

・マンドレル付

シートの熱変形を防止する特殊海绵状軟質ホイール
(オープンホイールストラクチャー)
3種の粗さから選択可能



製品番号	種類	単位	標準価格
J80044	ファイン (ホホワイト)	10枚	8,000円
J80050	ミディアム (グレー)		
J80049	コアース (ブラウン)		
J80361	アソート (ファイン4枚、ミディアム4枚、コアース2枚)		


シート切削研磨ステップ

		形態修正	中研磨	細部研磨	仕上げ研磨	艶出し
ソフトシート	スタンダードステップ	エルコカッターⅡ HSSドリル 特殊バサミ	リスコS	リスコID	リスコsil→ リスコ コアース→ ミディアム→ファイン	ホットエアバーナー FGシート
	シンプルステップ	エルコカッターⅡ HSSドリル 特殊バサミ		リスコsil (リスコID)		ホットエアバーナー FGシート
ハードシート	スタンダードステップ	エルコカッターⅡ HSSドリル 特殊バサミ	リスコB リスコS	リスコID	リスコsil	
	シンプルステップ	エルコカッターⅡ HSSドリル 特殊バサミ		リスコsil (リスコID)		

エルコカッターⅡ



届出番号:14B1X00011000584

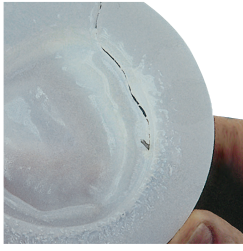

用途 シート切り出し用

シートの切り出しが可能なラフドリル

製品番号	単位	標準価格
J80645	2本	9,800円

HSSドリル



届出番号:14B1X00011000576



用途 シート切り出し用

シート辺縁の詳細な切り出しが可能なドリル

製品番号	種類	単位	標準価格
J80052	1.0mm	3本	7,300円
J81697	1.4mm	1本	3,500円

※1.4mmはサイレンサーSLのホールディングピンのドリリングに使用

特殊バサミ



用途 ハードシート(厚さ1mmまで)、ソフトシートの切り出し

辺縁形成から小帯部分の形成まで
思い通りのカットが可能

製品番号	単位	標準価格
J80352	1本	10,000円

MGフォーミングバーZr

届出番号:13B1X10089001004

HP



・シート形成用バー

ジルコニア製の形成用バー

製品番号	型番・タイプ	単位	標準価格
L20026	ORD701 Xファイン ホワイト	1本	5,000円
L20028	ORD1501 ミディアム ブラック		

正宗技 ラバーポイント

ダイテックジャパン

届出番号:22B3X00011000015

HP



用途 各種金属、各種レジンの研磨

鋭い切れ味と優れた耐久性を兼ね備えたマルチタイプのラバーポイント

製品番号	型番	最高許容回転数	単位	標準価格
L73151	220-13 (中研磨)	30,000rpm	12本	1,800円
L73152	500-13 (中仕上げ)			
L73153	1000-13 (仕上げ)			
L73141	RC-1 (中研磨)	10,000rpm	6本	
L73142	RM-1 (中仕上げ)			
L73143	RF-1 (仕上げ)			

スプリントフィニッシャー

SmartPractice

届出番号:27B3X00139000082, 27B3X00139000083



キット内容

- ・研磨材×1
- ・パフ×1

ダイヤモンド粒子高配合のハード系シート専用研磨材

製品番号	種類	入数	標準価格
L20030	キット	1セット	5,000円
L20031	パフ	6枚	3,800円

テイクオフプライヤー



用途 シート着脱用プライヤー

模型とシートの取り外しが簡便に行える
シート除去用プライヤー

製品番号	入数	標準価格
J81675	1本	11,500円

ホットメルトガン PKP18E



用途 メルトガン


マウスガードの補強や接合に使用する
EVA系スティックタイプの軟化抽出に使用する専用メルトガン

製品番号	入数	標準価格
J81046	1台	28,000円

エルコスティック



認証番号:15800BZY00051000 届出番号:1481X00011000506

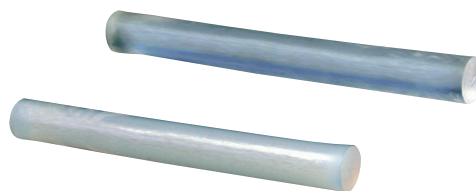

用途 メルトスティック

補強や接合に使用するEVA系スティックタイプ

製品番号	種類	サイズ	入数	標準価格
J80046	エルコスティック	φ10.5×100mm	18本	6,300円
J80351	エルコフレックス95 スティックタイプ	φ11.0×100mm		

ホットエアバーナー



用途 EVA系素材軟化用バーナー

特殊炎口形状により
炎や煙が発生せず、焦げやススを防止

製品番号	入数	標準価格
J80370	1本	25,300円

※ガス補充は市販の精製ブタンガスをご使用ください。

エルコガム



用途 ブロックアウトシリコンパテ

模型の大きなアンダーカットなどを埋める
シリコン系ブロックアウトパテ材

製品番号	カラー	容量	標準価格
J80364	クリア	400g	12,700円
J81892	ライラック	150g	5,800円

FGシート



用途 軟性材圧接用シート


表面を軟化させたEVAシートに軽く押し付ける事で
簡単に滑沢面の仕上げが可能な艶出しシート

製品番号	入数	標準価格
J81867	50枚	2,100円

ブロックアウトワックス



届出番号:1481X00011000514

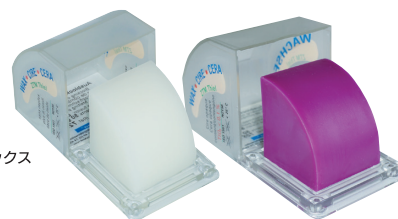

用途 高融点ブロックアウトワックス

・融点:92℃

作業模型の気泡や
アンダーカットの修正に使用する高融点ワックス

製品番号	カラー	容量	標準価格
J80387	ホワイト	50g	6,500円
J80386	ライラック		

エルコスキン



用途 ラバーマスキング剤

ホワイトニングトレー、3DSTレーのスペーサー、マージン部のリリースに使用するラバー系マスキング剤

製品番号	容量	標準価格
J80357	50mL	6,500円

エントフィッター



用途 接着用表面処理剤

ラミネートタイプのマウスガードを製作する際に使用するEVAシート専用接着作業用表面処理剤

製品番号	カラー	容量	標準価格
J80363	透明	50mL	5,400円

散弾



用途 ブロックアウト粒弾

作業模型の不必要な部分をブロックアウトするステンレス製粒弾基底面形成が不要になり、圧接したシートの過剰伸展を防止

製品番号	容量	標準価格
J80362	1.3kg	15,600円

カバーテンプレート



用途 散弾付着防止用シート

・材質: シリコン

シート成型後に不必要な散弾がシートに付着するのを防止

製品番号	厚さ	入数	標準価格
J80165	0.5mm	上顎用 2サイズ×各2 下顎用 2サイズ×各2	6,700円

オキシデンス



用途 オーラルアプライアンス専用洗浄剤

オーラルアプライアンス専用の酸素系洗浄剤

製品番号	種類	入数	標準価格
J80742	クリーンセット 洗浄BOX+洗浄バスケット+タブレット (32錠)	1セット	3,200円
J80743	タブレット	32錠	2,600円

エルコボックス スケルトンタイプ



用途 オーラルアプライアンス保管ボックス

・外寸: W80×D70×H45mm(ツブ部分含まず)

ボックス高径が高いため、デンチャー保管ボックスとしても使用可能
首から下げるストラップ付き

製品番号	入数	標準価格
J80051	20個	12,100円

サイナスリンス

ニールメッド

届出番号: 1383X1018800001 届出番号: 1383X1018800002 届出番号: 1383X1018800004
届出番号: 1383X1018800003 届出番号: 1383X1018800005 届出番号: 1383X1018800006



製品番号	タイプ	種類	入数	標準価格
K24680	粉末	サイナスリンス キット 10包 ●ボトル付	1セット	850円
K24695		サイナスリンス キット 60包 ●ボトル付	1セット	2,380円
K24682		サイナスリンス リフィル 60包	1箱	1,700円
K24696		サイナスリンス リフィル 120包	1箱	3,060円
K24684		サイナスリンス キッズ 30包 ●ボトル付	1セット	1,230円
K24685		サイナスリンス キッズ リフィル 60包	1箱	1,020円
K24687	—	サイナスリンススタンド ●乾燥・収納用スタンド	1個	680円




製品番号	タイプ	種類	入数	標準価格
K24694	ジェル	サイナスジェルスプレー 30mL ●鼻腔内保湿ジェルスプレー (ヒアルロン酸、アロエベラ配合)	1本	595円
K24686	ミスト	ベビーミスト 75mL 携帯用 ●薬品・防腐剤無配合 ●生理食塩水スプレー (塩化ナトリウム9mg/mL、 重曹0.5-1.0mg/mL、精製水)		650円
K24688		サイナスミスト 125mL ●薬品・防腐剤無配合 ●生理食塩水スプレー (塩化ナトリウム9mg/mL、 重曹0.5-1.0mg/mL、精製水)		850円
K24689		サイナスミスト ハイパートニック 125mL ●薬品・防腐剤無配合 ●高塩濃度スプレー (塩化ナトリウム27mg/mL、 重曹~3mg/mL、精製水)		1,020円

シンドス

ERKODENT®

届出番号: 1481X00011000594

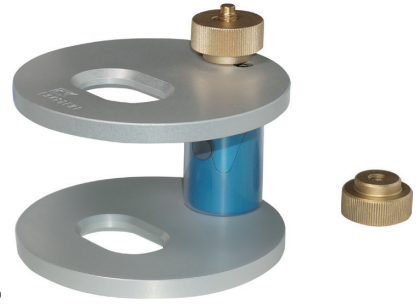


用途 リベース、
ライニング用咬合器

- ・材質: 真ちゅう製 (アルミニウム)
- ・サイズ: φ110mm×H95mm

シンプルな操作で精度の高い
リベース・ライニング作業が行える専用咬合器

製品番号	入数	標準価格
J80304	1個	30,400円

オーラルアプライアンス リーフレット

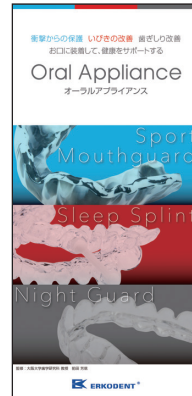

用途 患者説明用リーフレット

患者様にわかりやすく
オーラルアプライアンスについて
説明できるリーフレット

製品番号	入数	標準価格
J81698	20冊	1,000円

スリープスプリント リーフレット



用途 患者説明用リーフレット

患者様にわかりやすく
スリープスプリントについて
説明できるリーフレット

製品番号	入数	標準価格
J81918	20冊	1,000円

オーラルアプライアンス 院内用ポスター



用途 院内用ポスター

院内にて患者様にオーラルアプライアンスについて
説明できるA3サイズのポスター

製品番号	種類	入数	標準価格
J81919	スポーツマウスガード	1枚	1,000円
J81920	スリープスプリント		





ERKODENT GENERAL CATALOG

エルコデント総合カタログ



◀製品に関するHP

エルコデント専用ホームページ
<https://erkodent.jp/>



◀製品紹介動画

株式会社スマートプラクティスジャパン

□ 本社

〒242-0017 神奈川県大和市大和東2-2-13 アサヒヤマトビル2階

TEL.046-200-5615 FAX.046-401-1737

受付時間/平日10:00~17:00

休日/土・日・祝日



スマートプラクティスジャパンホームページ
<https://www.smartpractice.jp>

※掲載製品の仕様・包装が予告なく変更されたり、価格の改定を行う場合がございます。また、製品画像の色彩等が現物と異なる場合がございます。あらかじめご了承ください。

※製品価格はすべて税別です。

※本カタログ掲載内容及び画像の無断転載はかたくお断りします。

© 2023 SmartPractice Japan, Inc. All Rights Reserved.