

ERKODENT GENERAL CATALOG

エルコデント総合カタログ 2025~



世界の歯科医療発展のために

ドイツに本社を置くエルコデント社は、加圧・吸引成型器、成型用シートなどオーラルプライアンス関連製品を中心とした歯科器材メーカーです。特に主力製品の加圧成型器【エルコプレス】は、日本をはじめ世界各国で使用され信頼のブランドとして高い評価を得ています。

エルコデント社は、世界の歯科医療のさらなる発展のため日々研究・開発を重ね、高品質な製品を生み出し続けていきます。


オーラルプライアンスの製作からメンテナンスまでトータルにサポート

成型器 ▶ P.3-4

成型シート ▶ P.5-8



加圧成型器

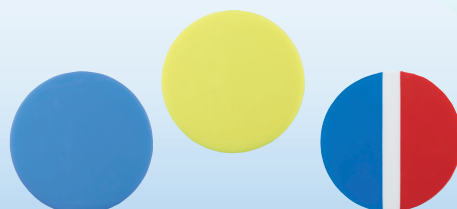


ソフトシート


模型の準備

成型器の選択


シートの選択

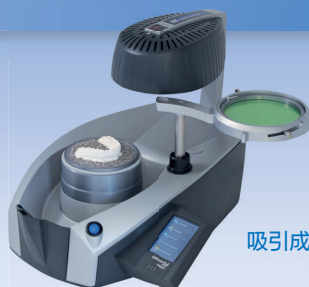

吸引成型器

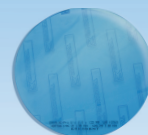

2層・3層構造シート

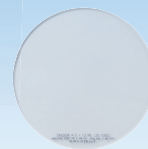

ハードシート

エルコデント社は1963年、
 歯科医師Erich H.Kopp氏により創業され
 60年以上高品質な製品を提供し続けています。



サイレンサー SL ▶ P.9


オプション製品 ▶ P.10-14



スリープスプリント
 製作用パーツ



研磨器材

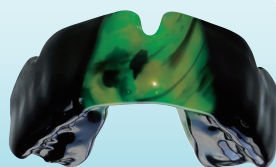


成型

形態修正・
 研磨

オーラル
 アプライアンス
 の完成

メンテナンス

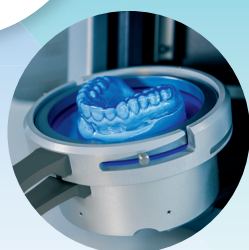

切削器材



洗浄剤



エルコデント成型器の特徴

加圧型・吸引型ともに、精緻な適合性にご満足いただけることを確信いたします。ご使用目的が矯正アライナーや拡大床、コーピングの製作であれば加圧型を、対合歯の圧痕を成型過程で付与されたい場合は、吸引型と対合歯圧跡付与器オクルフォーム3の併用を推奨いたします。

また、サーモフォーミング技術を多様な症例に使用されるのであれば、加圧型・吸引型両方の所有をお勧めしております。



▲製品の詳細情報



▲製品紹介動画

加圧型

高圧成型により、高精度の口腔内装置製作を実現します。

また、真上から加圧するタイプのため、水平方向から被覆するタイプと比較し空気の流入を防止し、シート厚をより均一に仕上げることが可能です。

吸引型

真空ポンプによる独自の瞬間吸引方式を採用しており、クーリング中も持続吸引します。

ご使用の際に、類似製品との比較における優位性を実感できます。



エルコプレス 加圧成型器 Pressure

- 自動圧接による容易な操作性
- 最大加圧6.0気圧(0.6MPa)により、精度の高いオーラルプライアンスの成型を実現
- 液晶タッチパネル操作によるシンプルな操作性(日本語対応・動画表示・スケジュールインストール済)
- 予備加熱不要、赤外線温度センサー機能による徹底した温度管理
- 高機能赤外線ヒーターによる均一なシート軟化

エルコプレス ci motion



届出番号:14B1X00011000590

エアークOMPレッサ
内蔵タイプ

オートタイプ



- ・電源電圧: AC100V 50/60Hz
- ・消費電力: 440W
- ・センサー許容感知温度: 240℃以下
- ・最大使用圧力: 0.6MPa (6bar)
- ・ノイズレベル: <70db (A)
- ・サイズ: W350×D430×H320mm
- ・重量: 21.3kg

製品番号

J82671

エルコプレス motion



届出番号:14B1X00011000589

エアークOMPレッサ
外部接続タイプ*

オートタイプ



- ・電源電圧: AC100V 50/60Hz
- ・消費電力: 380W
- ・センサー許容感知温度: 240℃以下
- ・最大使用圧力: 0.6MPa (6bar)
- ・ノイズレベル: <70db (A)
- ・サイズ: W350×D430×H320mm
- ・重量: 18.9kg

製品番号

J82670

*外部からのエア供給が必要です。



エルコフォーム 吸引成型器 Vacuum

- 最大真空値 0.8bar による適合精度の高いオーラルプライアンスの成型を実現
- 予備加熱不要、赤外線温度センサー機能による自動温度管理
- 液晶タッチパネル操作によるシンプルな操作性(日本語対応・動画表示・スケジュールインストール済)
- 高性能赤外線ヒーターによる均一なシート軟化

エルコフォーム 3D motion



届出番号:14B1X00011000575

オートタイプ

オートマチックサーモフォーミング(自動)により
容易な操作性を実現



- ・電源電圧:AC100V 50/60Hz
- ・消費電力:340W
- ・センサー許容感知温度:240℃以下
- ・内蔵型真空ポンプ:真空値0.8bar
- ・最大吸引力:6L/分
- ・ノイズレベル:<60db (A)
- ・サイズ:W350×D370×H315mm
- ・重量:13.9kg

製品番号

J80632

エルコフォーム 3D Plus



届出番号:14B1X00011000509

マニュアルタイプ

マニュアルサーモフォーミング(手動)



- ・電源電圧:AC100V 50/60Hz
- ・消費電力:340W
- ・センサー許容感知温度:240℃以下
- ・内蔵型真空ポンプ:真空値0.8bar
- ・最大吸引力:6L/分
- ・ノイズレベル:<60db (A)
- ・サイズ:W350×D370×H315mm
- ・重量:11.9kg

製品番号

J81877

エルコフォーム3D専用オプション



オクルフォーム3 アライメンター付




対合歯圧痕付与に使用

製品番号

J81924

オクルフォーム3用 アライメンター (単品)

モデルポット上の模型の
切歯点と咬合平面の平均値
アライメントをとるデバイス

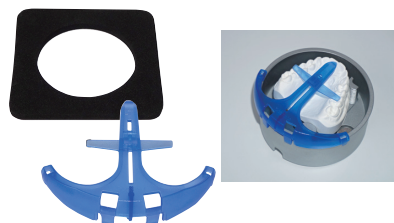

製品番号

J81923

オクルフォーム3用 OCC3-4P

3Dプリントモデルを
固定するためのデバイス
スキャナー・3Dプリンター・
模型作成ソフト要



製品番号

J80943

スポーツマウスガード用シート

届出番号:14B1X00011000500 届出番号:14B1X00011000501

用途 スポーツマウスガード

カラーマウスガード

材質:EVA

シングルカラー 全14色

シングルカラー(単色)の
スポーツマウスガード用成型シート



カラーマウスガード シングルカラー各種には
それぞれイソホール(分離)シートが貼付されています。
但し現在移行中のため、貼付されていない製品も混在しております。

カラーマウスガードフリースタイル 材質:EVA

マーブルカラー 全10色

マーブルカラー(特殊色)の
スポーツマウスガード用成型シート



カラーマウスガードマルチカラー 材質:EVA

フラッグカラー 全5色

フラッグカラー(国旗色)の
スポーツマウスガード用成型シート



※複数色の成型シートを圧接する際は圧接位置や条件により仕上がりが変わります。圧接前に十分なご確認をお願いいたします。画像のような仕上がりにならない場合もございます。

種類	カラー	丸型(φ120mm)				角型(125×125mm)	
		1枚		5枚 ※		5枚 ※	
		厚さ:2.0mm	厚さ:4.0mm	厚さ:2.0mm	厚さ:4.0mm	厚さ:2.0mm	厚さ:4.0mm
		製品番号	製品番号	製品番号	製品番号	製品番号	製品番号
カラーマウスガード (シングルカラー)	ブライトレッド	J82625	J82639	J81625	J81639	J81654	J81659
	ブライトイエロー	J82626	J82640	J81626	J81640	J81653	J81657
	ブライトブルー	J82627	J82641	J81627	J81641	J81655	J81660
	ブライトグリーン	J82628	J82642	J81628	J81642	J81656	J81658
	ブライトピンク	J82629	J82643	J81629	J81643	J81715	J81664
	ピュアホワイト	J82635	J82649	J81635	J81649	J81722	J81662
	ダークブルー	J82631	J82645	J81631	J81645	J81717	J81665
	ライトブルー	J82632	J82646	J81632	J81646	J81718	J81726
	マルーン	J82633	J82647	J81633	J81647	J81720	J81728
	ディーブグリーン	J82634	J82648	J81634	J81648	J81721	J81729
	ディーブレッド	J82630	J82644	J81630	J81644	J81716	J81663
	ディーブブラック	J82636	J82650	J81636	J81650	J81723	J81661
	ゴールド	J82637	J82651	J81637	J81651	J81724	J81730
	シルバー	J82638	J82652	J81638	J81652	J81725	J81731
	アソート(15枚) 上記各色1枚・クリア1枚	—	—	J80674	J80684	J81719	J81727
カラーマウスガード フリースタイル (マーブルカラー)	カモフラージュ	J82604	J82615	J81604	J81615	J81732	J81744
	ラバ	J82605	J82616	J81605	J81616	J81733	J81745
	タイダイ	J82606	J82617	J81606	J81617	J81734	J81746
	レインボー	J82607	J82618	J81607	J81618	J81735	J81747
	コンフェッティ	J82608	J82619	J81608	J81619	J81736	J81748
	アソート①(5枚) 上記各色1枚	—	—	J81609	J80694	J81741	J81753
	ゼブラ	J82610	J82620	J81610	J81620	J81737	J81749
	ゴールドフレイク	J82611	J82621	J81611	J81621	J81738	J81750
	シルバーフレイク	J82612	J82622	J81612	J81622	J81739	J81751
	カモフラージュストリップ	J82613	J82623	J81613	J81623	J81740*	J81752*
ラバストリップ	J82614	J82624	J81614	J81624	J81742	J81754*	
	アソート②(5枚) 上記各色1枚	—	—	J80693	J80695	J81743	J81755
カラーマウスガード マルチカラー (フラッグカラー)	ウエイズロット	J80680	J80691				
	フレンチ	J80675	J80686				
	イタリアン	J80677	J80688				
	ジャーマン	J80676	J80687				
	ファン	J80678	J80689				


※の製品は受注後のお取り寄せとなります。
※シングルカラーアソートのみ15枚

エルコデント社の成型シートは、徹底した品質管理のもと製造されています。スポーツマウスガード・ナイトガード・スプリント・スリープスプリントなど、さまざまな用途で使える成型シートをラインナップしています。

プレイセーフ トリプル (3層構造シート)



届出番号: 14B1X00011000570

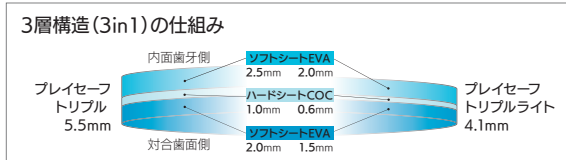

※他カラーは、P5掲載の「スポーツマウスガード用シート」製品画像をご参照ください。

用途: スポーツマウスガード 材質: EVA / COC

高い衝撃吸収効果と衝撃分散効果を兼ね備え、ソフトシート&ハードシートを一体化したトリプルレイヤー(3層構造)スポーツマウスガード用シート

カラー	プレイセーフ トリプル (丸型φ120×厚さ5.5mm)		プレイセーフ トリプルライト (丸型φ120×厚さ4.1mm)	
	1セット (シート1枚+エルコボックス1個)	シート単品 (5枚)	1セット (シート1枚+エルコボックス1個)	シート単品 (5枚)
	製品番号	製品番号	製品番号	製品番号
クリア	J81685	J81872	J81873	J81874*
ブライトレッド	J81756*	J81800*	J81776*	J81824*
ブライティエロー	J81757	J81801*	J81777*	J81825*
ブライトブルー	J81681	J81802	J81778	J81826
ブライトグリーン	J81682*	J81803*	J81779*	J81827*
ブライトピンク	J81683*	J81804*	J81780*	J81828*
ディープレッド	J81758*	J81805*	J81781	J81829*
ダークブルー	J81759*	J81806*	J81782	J81830*
ライトブルー	J81760*	J81807*	J81783*	J81831*
マルーン	J81761*	J81808*	J81784*	J81832*
ディープグリーン	J81762*	J81809*	J81785*	J81833*
ピュアホワイト	J81763	J81810*	J81786	J81834
ディープブラック	J81684*	J81811*	J81787*	J81835*
ゴールド	J81764	J81812	J81788	J81836*
シルバー	J81765*	J81813*	J81789*	J81837*
カムフラージュ	J81766*	J81814*	J81790	J81838*
ラバ	J81767*	J81815*	J81791*	J81839*
タイダイ	J81768*	J81816*	J81792	J81840*
レインボー	J81769*	J81817*	J81793*	J81841*
コンフェッティ	J81770*	J81818*	J81794*	J81842*
ゼブラ	J81771*	J81819*	J81795*	J81843*
ゴールドフレイク	J81772	J81820*	J81796*	J81844*
シルバーフレイク	J81773*	J81821*	J81797*	J81845*
カムフラージュストリップ	J81774*	J81822*	J81798*	J81846*
ラバストリップ	J81775*	J81823*	J81799	J81847*

※の製品は受注後のお取り寄せとなります。

スターターセット

セット内容

- シート(クリア)×1
- エルコボックス×1
- プレイセーフ バイトスペーサー×1
- プレイセーフ フェイスチャック×1

プレイセーフトリプル (丸型φ120×厚さ5.5mm)セット

製品番号	単位
J81678	1セット

プレイセーフトリプルライト (丸型φ120×厚さ4.1mm)セット

製品番号	単位
J81848	1セット

単品



※オクルフォーム3を用いた対合圧痕に使用する専用パーツ

プレイセーフ フェイスチャック

製品番号	単位
J81680	1個

プレイセーフ バイトスペーサー

製品番号	単位
J81868	3枚

エルコボックス スケルトンタイプ

製品番号	単位
J80051	20個

エルコフレックス (ソフトシート)



エルコフレックス

認証番号: 15700BZY00845000

用途: スポーツマウスガード
ドラッグデリバリートレー
ポジショナー
ブラケットトランスファートレー

材質: EVA
ショア硬度: 80
カラー: クリア



入数	厚さ	丸型 (φ120mm)		角型 (125×125mm)	
		製品番号	製品番号	製品番号	製品番号
20枚	1.0mm	J80461	J80111		
	1.5mm	J80462	J80112		
10枚	2.0mm	J80463	J80113		
	3.0mm	J80464	J80118		
	4.0mm	J80465	J80123		
	5.0mm	J80466			

エルコフレックス95

届出番号: 14B1X00011000506

用途: ドラッグデリバリートレー
オクルーザルスプリント

材質: EVA
ショア硬度: 92
カラー: クリア



入数	厚さ	丸型 (φ120mm)		角型 (125×125mm)	
		製品番号	製品番号	製品番号	製品番号
20枚	1.0mm ※	J80564	J81878		
	1.5mm	J80561	J81879		
10枚	2.5mm	J80562	J81880		
	4.0mm	J80563	J81881		


※厚さ1.0mm: ホワイトニング・フッ化物塗布トレー用

エルコフレックス各種にはそれぞれイソホイール(分離)シートが貼付されています。

エルコジュール (ハードシート)

エルコジュール・エルコジュール フリーズ

認証番号: 219AKBZX00128000

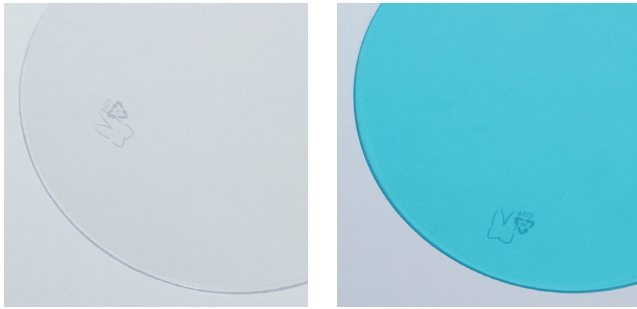

エルコジュール

エルコジュール フリーズ

用途 オクルーザルスプリント・スリープスプリント・ドリリングテンプレート
X-rayテンプレート・ドラッグデリバリー・リテーナー


- ・材質: PETG
- ・カラー:
エルコジュール/クリア
エルコジュール フリーズ/ターコイズ

アクリルレジンとの接合が可能

種類	入数	厚さ	丸型 (φ120mm)	角型 (125×125mm)
			製品番号	製品番号
エルコジュール	20枚	0.5mm	J80421	—
		0.6mm	J80422	J80102
		0.8mm	J80423	J80103
		1.0mm	J80424	J80104
	10枚	1.5mm	J80425	J80105
		2.0mm	J80426	J80106
		3.0mm	J80427	—
		4.0mm	J80428	—
エルコジュール フリーズ	20枚	1.0mm	J80554	—
		1.5mm	J80555	—
	10枚	2.0mm	J80556	—
		3.0mm	J80557	—

エルコジュール OM1・A1・A2・A3

届出番号: 14B1X00011000617, 14B1X00011000502, 14B1X00011000616, 14B1X00011000569

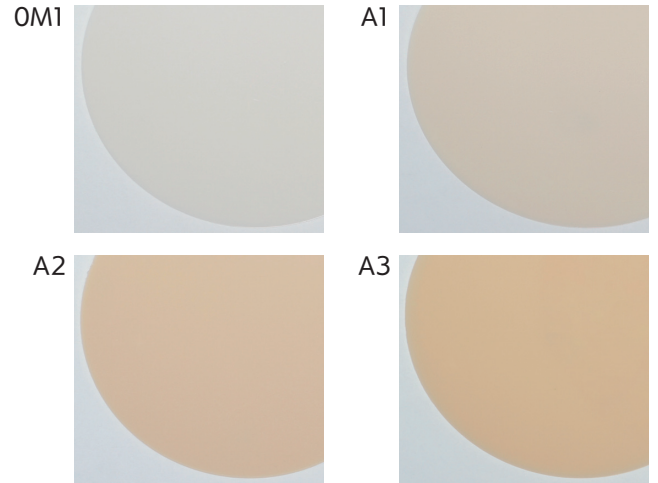

用途 審美用マウスピース

- ・材質: PETG


カラー	入数	厚さ	丸型 (φ120mm)	角型 (125×125mm)
			製品番号	製品番号
OM1	20枚	0.6mm	J80072	J80076
		1.0mm	J80073	J80077
	10枚	1.5mm	J80074	J80078
		2.0mm	J80075	J80079
A1	20枚	0.6mm	J80576	J80581
		1.0mm	J80577	J80579
	10枚	2.0mm	J80578	J80580
		2.0mm	J80578	J80580
A2	20枚	0.6mm	J80064	J80068
		1.0mm	J80065	J80069
	10枚	1.5mm	J80066	J80070
		2.0mm	J80067	J80071
	20枚	0.6mm	J81670	—
		1.0mm	J81671	—
10枚	2.0mm	J81672	—	

エルコジュール各種にはそれぞれイソホイール(分離)シートが貼付されています。

エルコロックプロ (2層構造シート)

届出番号: 14B1X00011000497

用途 オクルーザルスプリント
スリープスプリント
プロテクションスプリント
リテーナー

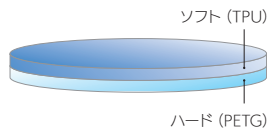

- ・材質: PETG / TPU



ハード (PETG) & ソフト (TPU) の2層構造シート

カラー	入数	厚さ	丸型 (φ120mm)	角型 (125×125mm)
			製品番号	製品番号
クリア	20枚	1.0mm	J81673	J81882
		1.3mm	J81674	J81883
	10枚	2.0mm	J80592	J81884
		3.0mm	J80593	J81885
		4.0mm	J80594	—
		5.0mm	J80595	—
ブルー	10枚	2.0mm	J81692	J81886
		3.0mm	J81693	J81887
		4.0mm	J81694	—
		5.0mm	J81695	—

カラー	入数	厚さ	丸型 (φ120mm)	角型 (125×125mm)
			製品番号	製品番号
グリーン	10枚	2.0mm	J81861	J81890
		3.0mm	J81862	J81891
		4.0mm	J81863	—
		5.0mm	J81864	—
ピンク	10枚	2.0mm	J81857	J81888
		3.0mm	J81858	J81889
		4.0mm	J81859	—
		5.0mm	J81860	—

※ソフト (TPU) 層の厚み 1.0mm、1.3mm → 0.4mm 2.0mm 以上 → 1mm

エルコロックプロにはイソホイール(分離)シートが貼付されています。

エルコレン

認証番号:15700BZY00846000



用途 コーピング・フッ化物ゲル用スペーサー
テンポラリークラウン

・材質:PE

アクリルレジンと接着しない特徴を持ったセパレートシート

製品番号	タイプ	厚さ	カラー	入数
J80401	丸型 (φ120mm)	0.5mm	乳白色	20枚
J80402		0.6mm		
J80403		0.7mm		
J80405		1.0mm		

エルコレンにはインホイール (分離シート) が貼付されています。

エルコジュールS



用途 スポーツマウスガード用補強材

・材質:SBS
・カラー:クリア

レイヤードタイプ マウスガードの補強材用

入数	厚さ	丸型 (φ120mm)
		製品番号
20枚	0.8mm	J80435

エルコプラスト PLA

届出番号:14B1X00011000581



ローズ

用途 基礎床

・材質:PLA

基礎床製作用シート

製品番号	タイプ	厚さ	カラー	入数
J81852	丸型 (φ120mm)	1.5mm	ローズ	10枚

ホットメルトガン PKP18E




用途 メルトガン

マウスガードの補強や接合に使用する
EVA系スティックタイプの軟化抽出に使用する専用メルトガン

製品番号	入数
J81046	1台

エルコスティック

認証番号:15800BZY00051000 届出番号:14B1X00011000506

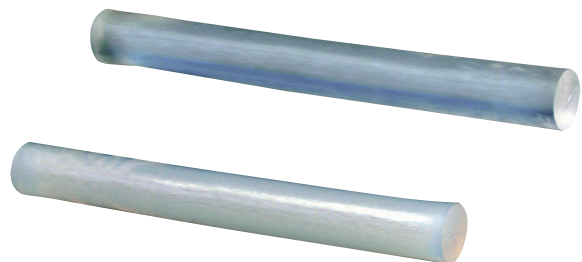

用途 メルトスティック

補強や接合に使用するEVA系スティックタイプ

製品番号	種類	サイズ	入数
J80046	エルコスティック	φ10.5×100mm	18本
J80351	エルコフレックス95 スティックタイプ	φ11.0×100mm	

スリープスプリント製作用パーツ


サイレンサーSLを用いたスリープスプリントの特徴

上下顎スプリント エルコロックプロ3.0mm（ハード&ソフトの2層構造シート）を使用し、装着性（快適性）を向上

はめ込み式パーツ




容易なアンカーとコネクタの脱着を実現

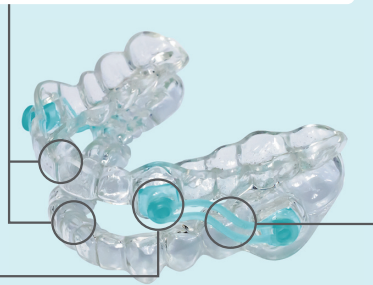

ダブルS状スロットコネクタ

- ①睡眠時の下顎後方移動を防止
- ②各パーツに加わる過度な負担を軽減し、装置の耐久性を向上
- ③可動領域（前方・側方）の自由度を広げ、装置の性能を向上

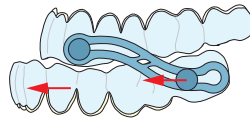

① 機能性

アンカーがコネクタ内を自由にスライドするため、閉鎖時の水平運動が可能

② シンプルな操作性

上下顎の位置関係の記録から装置の製作パーツまで取り揃えたオールインワンシステム

③ 快適性と耐久性

コネクタに加わる過度な負担を回避し装置の耐久性を向上

サイレンサーSL

届出番号:14B1X00011000572




用途 スリープスプリント

材質:PLA

ダブルS状スロットコネクタを採用したスリープスプリント製作用パーツ


製品番号	種類	入数
J81688		1セット
J81689	サイレンサーSLパーツカード	10シート
J81690	サイレンサーSLゲージ	5枚
J81696	サイレンサーSLコネクタ	1枚
J81121	サイレンサーSLコネクタ 21mm	10組
J81122	サイレンサーSLコネクタ 22mm	
J81123	サイレンサーSLコネクタ 23mm	
J81124	サイレンサーSLコネクタ 24mm	
J81125	サイレンサーSLコネクタ 25mm	
J81126	サイレンサーSLコネクタ 26mm	

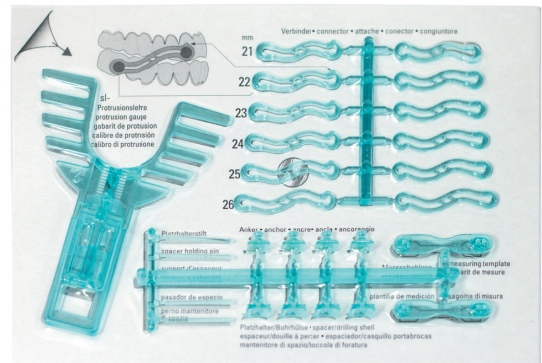

サイレンサーSLパーツカード



サイレンサーSLゲージ

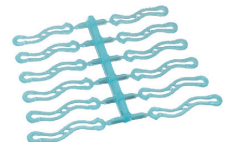

サイレンサーSLコネクタ

上記関連商品

エルコロックプロ ブルー 3.0mm

製品番号	入数
J81693	10枚

届出番号:14B1X00011000497

エルコロックプロ 3.0mm

製品番号	入数
J80593	10枚

届出番号:14B1X00011000497

エルコジュール 2.0mm

製品番号	入数
J80426	10枚

認証番号:219AKBZX00128000

ブロックアウトワックス ライラック

製品番号	容量
J80386	50g

届出番号:14B1X00011000514

エルコガムライラック

製品番号	容量
J81892	150g

リスコB

製品番号	入数
J81849	10枚

届出番号:14B1X00011000583

エルコカッターII

製品番号	単位
J80645	2本

届出番号:14B1X00011000584

MGフォーミングバー-Zr

製品番号	種類	単位
L20026	ORD701 Xファイン ホワイト	1本
L20028	ORD1501 ミディアム ブラック	

届出番号:13B1X10089001004

キット内容

- 研磨材×1
- パフ×1

スプリントフィニッシャー

製品番号	種類	入数
L20030	キット	1セット
L20031	パフ	6枚

届出番号:27B3X00139000082, 27B3X00139000083

HSSドリル1.4mm

製品番号	単位
J81697	1本

届出番号:14B1X00011000576

MGフォーミングバー-Zr

製品番号	種類	単位
L20026	ORD701 Xファイン ホワイト	1本
L20028	ORD1501 ミディアム ブラック	

届出番号:13B1X10089001004

スプリントフィニッシャー

製品番号	種類	入数
L20030	キット	1セット
L20031	パフ	6枚

届出番号:27B3X00139000082, 27B3X00139000083


リスコsil

届出番号:14B1X00011000591



切削性に優れた海绵状ホイール
中研磨から仕上げ研磨までのワンステップ研磨も可能

製品番号	種類	径	厚さ	単位
J80060	S	16mm	2.0mm	6枚
J80061	M	27mm	2.0mm	
J80062	L	27mm	4.0mm	
J80063	セット	—	—	3枚 (S,M,L各1枚)

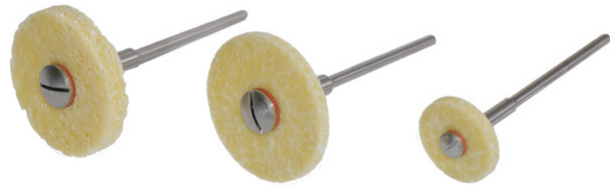

用途 ソフトシート、
ハードシートの中研磨
仕上げ研磨

・推奨回転数/5,000~10,000rpm
・マンドレル付

リスコS

届出番号:14B1X00011000511



用途 ソフトシート、ハードシートの中研磨


・推奨回転数/5,000~10,000rpm
・マンドレル付

ハーフオープンスタビライズド構造の硬質ホイール
ソフトシート、ハードシートの中研磨に使用

製品番号	単位
J80043	10枚

リスコID

届出番号:14B1X00011000499

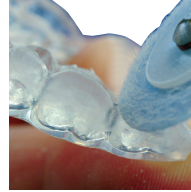

用途 ソフトシート、ハードシートの細部研磨

・推奨回転数/10,000~15,000rpm
・マンドレル付

熱圧縮形成されたディスクタイプの硬質ホイール
ダイヤモンドディスク等でのシェーピング形成が可能とな為、
シートの細部(歯頸部や鼓形空隙)の研磨に使用

製品番号	単位
J80053	6枚

リスコB

届出番号:14B1X00011000583



用途 ハードシートの中研磨

・推奨回転数/5,000~10,000rpm
・マンドレル付

ハードシート中研磨用超硬質ホイール
エルコジュールやエルコロックプロの中研磨に使用
超硬質構造の為、高い耐久性を実現

製品番号	単位
J81849	10枚

リスコ

届出番号:14B1X00011000510



用途 ソフトシートの仕上げ研磨

・推奨回転数/〜5,000rpm
・マンドレル付

シートの熱変形を防止する特殊海绵状軟質ホイール
(オープンホイールストラクチャー)
3種の粗さから選択可能



製品番号	種類	単位
J80044	ファイン (ホワイト)	10枚
J80050	ミディアム (グレー)	
J80049	コース (ブラウン)	
J80361	アソート (ファイン4枚、ミディアム4枚、コース2枚)	

シート切削研磨ステップ

		形態修正	中研磨	細部研磨	仕上げ研磨	艶出し
ソフトシート	スタンダードステップ	エルコカッターⅡ HSSドリル 特殊バサミ	リスコS	リスコID	リスコsil→ リスコ コアース→ ミディアム→ファイン	ホットエアバーナー FGシート
	シンプルステップ	エルコカッターⅡ HSSドリル 特殊バサミ		リスコsil (リスコID)		ホットエアバーナー FGシート
ハードシート	スタンダードステップ	エルコカッターⅡ HSSドリル 特殊バサミ	リスコB リスコS	リスコID	リスコsil	
	シンプルステップ	エルコカッターⅡ HSSドリル 特殊バサミ		リスコsil (リスコID)		

エルコカッターⅡ



届出番号:14B1X00011000584



用途 シート切り出し用

シートの切り出しが可能なラフドリル

製品番号	単位
J80645	2本

HSSドリル



届出番号:14B1X00011000576



用途 シート切り出し用

シート辺縁の詳細な切り出しが可能なドリル

製品番号	種類	単位
J80052	1.0mm	3本
J81697	1.4mm	1本

※1.4mmはサイレンサー-SLのホールディングピンのドリリングに使用

特殊バサミ



用途 ハードシート(厚さ1mmまで)、ソフトシートの切り出し

辺縁形成から小帯部分の形成まで思い通りのカットが可能

製品番号	単位
J80352	1本

MGフォーミングバーZr

届出番号:13B1X10089001004

HP



・シート形成用バー

ジルコニア製の形成用バー

製品番号	型番・タイプ	単位
L20026	ORD701 Xファイン ホワイト	1本
L20028	ORD1501 ミディアム ブラック	

正宗技 ラバーポイント

ダイテックジャパン

届出番号:22B3X00011000015

HP



用途 各種金属、各種レジンの研磨

鋭い切れ味と優れた耐久性を兼ね備えたマルチタイプのラバーポイント

製品番号	型番	最高許容回転数	単位
L73151	220-13 (中研磨)	30,000rpm	12本
L73152	500-13 (中仕上げ)		
L73153	1000-13 (仕上げ)		
L73141	RC-1 (中研磨)	10,000rpm	6本
L73142	RM-1 (中仕上げ)		
L73143	RF-1 (仕上げ)		

スプリントフィニッシャー

SmartPractice

届出番号:27B3X00139000082、27B3X00139000083

キット内容

- ・研磨材×1
- ・パフ×1



ダイヤモンド粒子高配合のハード系シート専用研磨材

製品番号	種類	入数
L20030	キット	1セット
L20031	パフ	6枚

テイクオフプライヤー



用途 シート着脱用プライヤー

模型とシートの取り外しが簡便に行える
シート除去用プライヤー

製品番号	入数
J81675	1本

ホットエアバーナー



用途 EVA系素材軟化用バーナー

特殊炎口形状により
炎や煙が発生せず、焦げやススを防止

製品番号	入数
J80370	1本

※ガス補充は市販の精製ブタンガスをご使用ください。

FGシート



用途 軟性材圧接用シート

表面を軟化させたEVAシートに軽く押し付ける事で
簡単に滑沢面の仕上げが可能な艶出しシート

製品番号	入数
J81867	50枚

エルコガム



用途 ブロックアウトシリコンパテ


模型の大きなアンダーカットなどを埋める
シリコン系ブロックアウトパテ材

製品番号	カラー	容量
J80364	クリア	400g
J81892	ライラック	150g

ブロックアウトワックス



届出番号:14B1X00011000514

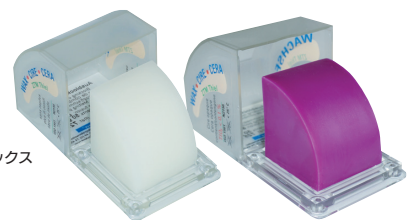

用途 高融点ブロックアウトワックス

・融点:92℃

作業模型の気泡や
アンダーカットの修正に使用する高融点ワックス

製品番号	カラー	容量
J80387	ホワイト	50g
J80386	ライラック	

エルコスキン



用途 ラバーマスキング剤

ホワイトニングトレイ、
3Dストレートのスペーサー、
マージン部のリリースに使用する
ラバー系マスキング剤

製品番号	容量
J80357	50mL

エントフィッター



用途 接着用表面処理剤

ラミネートタイプの
マウスガードを製作する際に使用する
EVAシート専用接着作業用表面処理剤

製品番号	カラー	容量
J80363	透明	50mL



散弾



用途 ブロックアウト粒弾

作業模型の不必要な部分をブロックアウトするステンレス製粒弾。基底面形成が不要になり、圧接したシートの過剰伸展を防止。

製品番号	容量
J80362	1.3kg

カバーテンプレート



用途 散弾付着防止用シート

・材質:シリコン

シート成型後に不必要な散弾がシートに付着するのを防止

製品番号	厚さ	入数
J80165	0.5mm	上顎用 2サイズ×各2 下顎用 2サイズ×各2

マンチーズ



歯科矯正用クリアアライナーとリテーナーの装着を最適化するために使用

トライアルパック



パック内容

- ・ファーム (イエロー) ×1
- ・ジェントル MAX (グリーン) ×1

製品番号	単位
K89001	2個

オキシデンス



用途 オーラルアプライアンス専用洗浄剤

オーラルアプライアンス専用の酸素系洗浄剤

製品番号	種類	入数
J80742	クリーンセット 洗浄BOX+洗浄バスケット+タブレット (32錠)	1セット
J80743	タブレット	32錠

エルコボックス スケルトンタイプ



用途 オーラルアプライアンス保管ボックス

・外寸: W80×D70×H45mm(ツム部分含まず)

ボックス高径が高いため、デンチャー保管ボックスとしても使用可能。首から下げるストラップ付き

製品番号	入数
J80051	20個

バルクパック ソフトタイプ



※MAXは厚みが30%大きくなります。

製品番号	製品	単位
K89006	ジェントルアソート (3色)	24個
K89008	ジェントル (パープル)	
K89009	ジェントル (ブルー)	
K89010	ジェントル MAX (グリーン)	

バルクパック ハードタイプ



※MAXは厚みが30%大きくなります。

製品番号	製品	単位
K89007	ファームアソート (3色)	24個
K89011	ファーム (イエロー)	
K89012	ファーム (オレンジ)	
K89013	ファーム MAX (レッド)	



サイナスリンス

ニールメッド

届出番号: 13B3X10188000001、13B3X10188000009、13B3X10188000002、13B3X10188000004、13B3X10188000003、13B3X10188000005、13B3X10188000006、13B3X10188000012



製品番号	タイプ	種類	入数
K24680	粉末	サイナスリンス キット 10包 ●240mLボトル付	1セット
K24695		サイナスリンス キット 60包 ●240mLボトル付	1セット
K24682		サイナスリンス リフィル 60包	1箱
K24696		サイナスリンス リフィル 120包	1箱
K24698		サイナスリンス メガボトル キット 10包 ●480mLボトル付	1セット
K24684		サイナスリンス キッズ 30包 ●120mLボトル付	1セット
K24685	—	サイナスリンス キッズ リフィル 60包	1箱
K24687		サイナスリンススタンド ●乾燥・収納用スタンド	1個




製品番号	タイプ	種類	入数
K24694	ジェル	サイナスジェルスプレー 30mL ●鼻腔内保湿ジェルスプレー (ヒアルロン酸、アロエベラ配合)	1本
K24686	ミスト	ベビーミスト 75mL 携帯用 ●薬品・防腐剤無配合 ●生理食塩水スプレー (塩化ナトリウム9mg/mL、 重炭酸ナトリウム0.5-1mg/mL、精製水)	
K24688		サイナスミスト 125mL ●薬品・防腐剤無配合 ●生理食塩水スプレー (塩化ナトリウム9mg/mL、 重炭酸ナトリウム0.5-1mg/mL、精製水)	
K24689		サイナスミスト ハイパートニック 125mL ●薬品・防腐剤無配合 ●高塩濃度スプレー (塩化ナトリウム27mg/mL、 重炭酸ナトリウム~3mg/mL、精製水)	
K24699		サイナスミスト キシリトール 125mL ●薬品・防腐剤無配合 ●キシリトール入り生理食塩水スプレー (塩化ナトリウム9mg/mL、 重炭酸ナトリウム 0.4~1mg/mL、 精製水、キシリトール、ユーカリオイル)	

塩化ナトリウム・重炭酸ナトリウム・精製水はUSPグレード(米国薬局方標準品)を使用

シンドス

ERKODENT®

届出番号: 14B1X00011000594

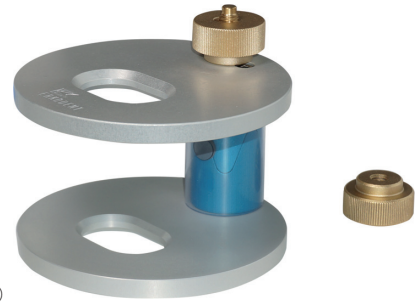

用途 リベース、
リライニング用咬合器


- ・材質: 真ちゅう製(アルミニウム)
- ・サイズ: φ110mm×H95mm

シンプルな操作で精度の高い
リベース・リライニング作業が行える専用咬合器

製品番号	入数
J80304	1個

オーラルプライアンス リーフレット

スリープスプリント リーフレット

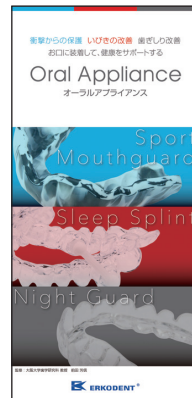

用途 患者説明用リーフレット

患者様にわかりやすく
オーラルプライアンスについて
説明できるリーフレット

製品番号	入数
J81698	20冊



用途 患者説明用リーフレット

患者様にわかりやすく
スリープスプリントについて
説明できるリーフレット

製品番号	入数
J81918	20冊

オーラルプライアンス 院内用ポスター



用途 院内用ポスター

院内にて患者様にオーラルプライアンスについて
説明できるA3サイズのポスター

製品番号	種類	入数
J81919	スポーツマウスガード	1枚
J81920	スリープスプリント	





ERKODENT GENERAL CATALOG

エルコデント総合カタログ



◀製品に関するHP

エルコデント専用ホームページ
<https://erkodent.jp/>



◀製品紹介動画

株式会社スマートプラクティスジャパン

□ 本社

〒242-0017 神奈川県大和市大和東2-2-13 アサヒヤマトビル2階

TEL.046-200-5615 FAX.046-401-1737

受付時間/平日 9:00~17:30

休日/土・日・祝日



スマートプラクティスジャパンホームページ
<https://www.smartpractice.jp>

※掲載製品の仕様・包装が予告なく変更されたり、価格の改定を行う場合がございます。また、製品画像の色彩等が現物と異なる場合がございます。あらかじめご了承ください。

※製品価格はすべて税別です。

※本カタログ掲載内容及び画像の無断転載はかたくお断りします。

© 2025 SmartPractice Japan, Inc. All Rights Reserved.